

Distribuito in Italia da:

Novamedisan italia s.r.l.
40129 Bologna - Italy

Tel: +39 051 327911-326888
Fax: +39 051 327905-326325
info@novamedisan.it



polySteribox®


Il comodo contenitore per la preparazione, il trasporto e la conservazione sterile dello strumentario

Il contenitore polySteribox® Ritter Medical per la preparazione, la conservazione e il trasporto sterile dello strumentario offre una soluzione sicura e conforme ai requisiti dei processi convalidati relativi ai prodotti sterili.

polySteribox® è disponibile nelle dimensioni standard SH, M, L ed XL compatibili con tutti i dispositivi. Realizzato in materiale plastico semi-trasparente, dotato di elevata stabilità meccanica e resistente fino a 150 °C, polySteribox® è adatto per i dispositivi automatici di pulizia e disinfezione (lavaferrri), per i processi consigliati dal Robert Koch Institut di "sterilizzazione a vapore sotto

vuoto" fino a 134 °C, per la sterilizzazione al plasma (STEARRAD®) e mediante gas con (Formaldeide e Eto) a un massimo di 65 °C. Il coperchio e la parte inferiore del contenitore offrono una chiusura ermetica a prova penetrazione dei batteri.

polySteribox® è disponibile sia con un filtro della durata di un anno che con un filtro permanente. Il sistema di chiusura brevettato è compatibile con tutti i modelli, protegge contro l'apertura accidentale e garantisce un trasporto sicuro. Questi contenitori consentono di risparmiare spazio, sono facili da impilare e quindi adatti per lo stoccaggio.

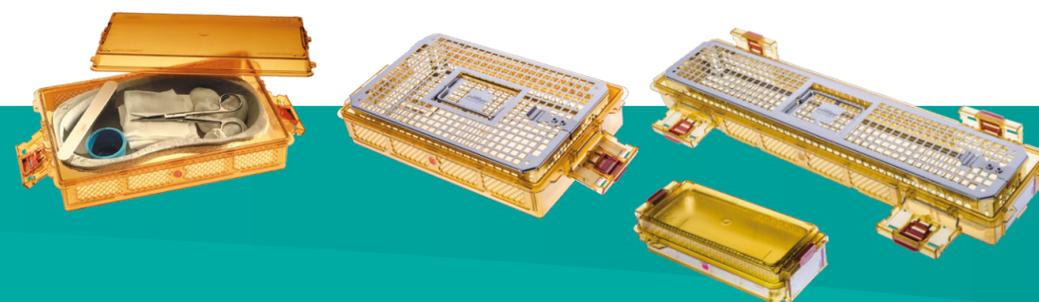


polySteribox®

SH, M, L, XL

Il contenitore per la preparazione, il trasporto e la conservazione sterile dello strumentario



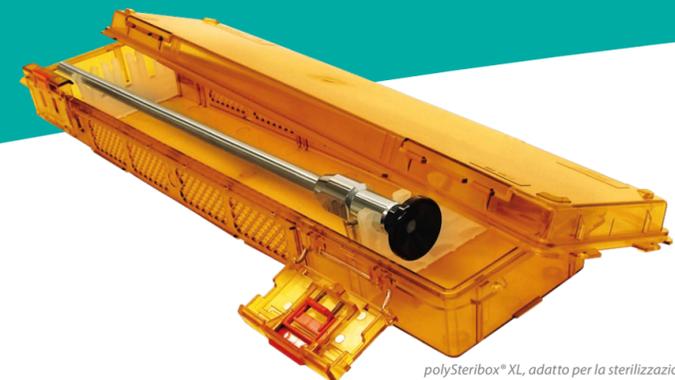


polySteribox® XL, adatto per la sterilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio di dispositivi delicati, come l'endoscopio.



polySteribox® L



Cestello L con coperchio

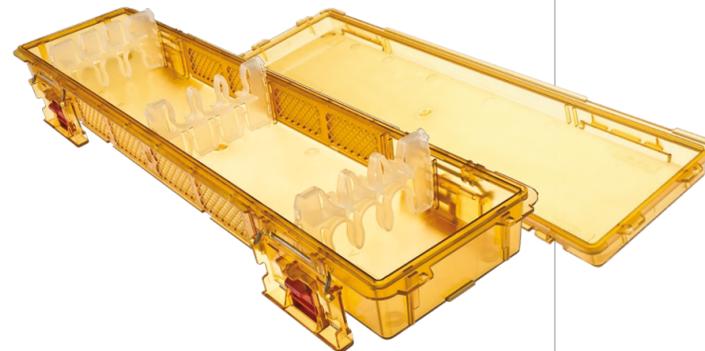

Base e coperchio del contenitore XL



Etichetta

Sigilli di sicurezza



polySteribox®



SH, M, L, XL

Codice	Descrizione articolo	Dimensioni esterne	Confezione	Box
41109 - 0000	polySteribox® SH	208 x 111 x 55	1	5
41106 - 0000	polySteribox® M	185 x 145 x 59	1	5
41107 - 0000	polySteribox® L	290 x 184 x 74	1	5
41111 - 0000	polySteribox® XL	497 x 122 x 65	1	5
41109 - 0001	polySteribox® SH + filtro permanente	208 x 111 x 55	1	5
41106 - 0001	polySteribox® M + filtro permanente	185 x 145 x 59	1	5
41107 - 0001	polySteribox® L + filtro permanente	290 x 184 x 74	1	5
41111 - 0001	polySteribox® XL + filtro permanente	497 x 122 x 65	1	5



XL, L, M, SH

- Riduzione dei costi per acquisto, stoccaggio e smaltimento rispetto ai contenitori tradizionali in acciaio/alluminio.
- Riduzione dei processi operativi grazie alla gestione semplificata.
- Se si eseguono periodicamente controlli visivi, polySteribox® non necessita di alcuna manutenzione.
- polySteribox® dispone di apertura meccanica per semplificarne la pulizia e la disinfezione.
- La semitrasparenza consente di controllare il contenuto del polySteribox® senza aprirlo.
- polySteribox® protegge la strumentazione da danni e previene la contaminazione.
- Etichette, sigillo di sterilizzazione e sistemi di bloccaggio del contenitore polySteribox® ne proteggono l'integrità e offrono la possibilità della rintracciabilità.

Dispongono di certificazione CE secondo la direttiva europea 93/42/EWG e sono realizzati secondo gli standard di qualità DIN EN ISO 17664, 13485 e 11137-1.

In qualità di sistema convalidato, polySteribox® è conforme ai requisiti DIN 58952, DIN 58953, EN 868-1, 868-8, 554 e DIN EN ISO 11607.

Accessori


Codice	Descrizione articolo	Confezione
41006 - 0000	Sigilli di sicurezza	1000
94001 - 0159	Targhetta iscrizione dati SH, M, L, XL	1000
94001 - 0126	Tappetino antiscivolo in silicone SH	1
94001 - 0191	Tappetino antiscivolo in silicone M	1
94001 - 0192	Tappetino antiscivolo in silicone L	1
94001 - 0215	Inserto a griglia in acciaio inox	1
94001 - 0256	Cestello SH	1
94001 - 0257	Cestello M	1
94001 - 0197	Cestello L	1
94001 - 0242	Cestello L con coperchio	1
94001 - 0240	Cestello XL con coperchio per 2 endoscopi	1
41206 - 0000	Supporto per endoscopio piccolo, XL	1
41206 - 0001	Supporto per endoscopio grande, XL	1



Cestello



Inserto a griglia in acciaio inox

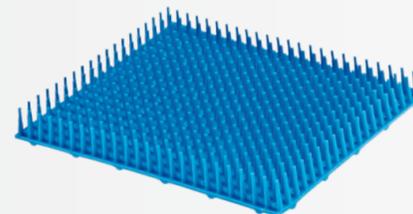

Tappetino antiscivolo in silicone



Cestello per 2 endoscopi

Parti sostituibili

Codice	Descrizione articolo	Confezione
41302 - 0000	Supporto filtro per contenitore SH	1
41204 - 0000	Coperchio per contenitore SH	1
41205 - 0000	Parte inferiore SH	1
41002 - 0000	Supporto filtro per contenitore M	1
41004 - 0000	Coperchio per contenitore M	1
41005 - 0000	Parte inferiore M	1
41102 - 0000	Supporto filtro per contenitore L ed XL	1
41104 - 0000	Coperchio per contenitore L	1
41105 - 0000	Parte inferiore L	1
41104 - 0001	Coperchio per contenitore XL	1
41105 - 0002	Parte inferiore XL	1
41110 - 0000	Dispositivo di chiusura per SH, M, L, XL	1
41300 - 0000	Set filtro per contenitore SH	1
41300 - 0001	Set filtro per contenitore M	1
41300 - 0002	Set filtro per contenitore L ed XL	1
41300 - 0003	Set filtro permanente per contenitore SH	1
41300 - 0004	Set filtro permanente per contenitore M	1
41300 - 0005	Set filtro permanente per contenitori L ed XL	1



Supporto per endoscopio



Parte inferiore SH